

Mode d'emploi:

Veillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser Anneaux d'érection pour la première fois. Cet article peut, en cas d'utilisation non conforme, occasionner des blessures.

Information sur le produit:

Anneaux d'érection est un article destiné aux hommes souffrant d'impuissance (dysfonction érectile) légère. Il est destiné à une amélioration de l'érection. Il est utilisé par des hommes qui ne sont pas satisfaits de la qualité de leur érection ou par des hommes dont la qualité de l'érection ne dure pas suffisamment pour un rapport sexuel.

Qu'est ce que la dysfonction érectile (impuissance)?

L'impuissance est un terme familier désignant une « dysfonction érectile » (terme médical). Une impuissance est présente lorsque l'érection n'est pas suffisante pour un rapport sexuel.

L'érection est le résultat d'une augmentation du flux sanguin dans le pénis. Ce sang s'accumule momentanément grâce à une fermeture des veines qui réduit son retour vers le corps. Il existe différentes formes (stades) de la dysfonction érectile. Certains hommes n'obtiennent pas d'érection car leurs veines ne se ferment pas suffisamment et le sang nécessaire à l'érection ne reste pas dans le pénis. Anneaux d'érection maintient le sang plus longtemps dans le pénis et le laisse repartir vers le corps progressivement.

Certaines maladies comme le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, certaines lésions au niveau des faisceaux nerveux, l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme, peuvent également causer une impuissance.

La prise de médicaments peut aussi entraîner une impuissance. Dans ces cas, Anneaux d'érection ne peut apporter qu'une amélioration limitée.

Caractéristiques du produit:

Anneaux d'érection a été développé pour améliorer la rigidité et le remplissage du pénis. Anneaux d'érection est en caoutchouc de silicone et disponible en trois tailles. Il est facilement extensible. La pression exercée réduit le retour du sang vers le corps. De plus amples informations figurent dans le texte ci-dessous.

Recommandations d'utilisation:

1. Anneaux d'érection est enfilé avant l'érection/excitation. Afin d'obtenir la meilleure érection possible, le choix de la bonne taille d'Anneaux d'érection est important. Parmi les trois anneaux, commencez avec le plus grand.
2. Introduisez en premier lieu vos testicules, puis votre pénis au repos dans l'anneau et poussez l'anneau en direction du corps. L'anneau passe à présent sur votre pénis et entre vos testicules et votre corps.
3. Lorsque l'excitation conduit à une érection, Anneaux d'érection réduit le retour du

sang vers le corps. La rigidité est ainsi obtenue plus rapidement. Elle est également plus forte et peut durer plus longtemps.

4. Anneaux d'érection améliore et renforce l'érection naturelle. La position de l'anneau devant le pubis permet une stimulation clitoridienne de la partenaire.
5. Retrait : après le rapport sexuel ou lorsque l'érection est trop forte, Anneaux d'érection peut être retiré facilement : étirez-le avec les deux mains et attendez que l'érection diminue. Ensuite, vous pouvez retirez en premier lieu votre pénis, puis vos testicules. Anneaux d'érection peut être utilisé de nombreuses fois.

Importante:

Vous devez absolument discuter avec votre médecin avant d'utiliser Anneaux d'érection si un de ces cas se présente :

- vous avez un pénis déformé
- vous avez des raisons médicales de ne pas pratiquer d'activité sexuelle

- vous souffrez de drépanocytose, de leucémie, de tumeurs de la moelle osseuse ou d'une autre maladie qui cause une modification de la coagulation du sang, des saignements et un prolongement de l'érection.

Mises en garde et précautions:

Ce produit est fabriqué sans latex.

N'utilisez jamais Anneaux d'érection pendant plus de 30 minutes.

Une utilisation trop longue d'Anneaux d'érection peut conduire à une blessure durable du pénis. Ne vous endormez pas avec l'anneau en place sur le pénis.

En cas de problèmes, consultez votre médecin et n'utilisez plus Anneaux d'érection. Ne prenez ni alcool ni calmant lors de l'utilisation d'Anneaux d'érection. N'utilisez pas Anneaux d'érection si votre pénis est insensible à la douleur.

N'utilisez pas Anneaux d'érection si la mobilité de vos mains est limitée.

Effets indésirables possibles:

- Erection permanente : si l'érection perdue pendant plus de 2 heures, appelez immédiatement votre médecin.
- Blessure durable de la base du pénis en cas d'utilisation d'Anneaux d'érection pendant plus de 30 minutes ou lorsqu'il est trop serré.

Recommandations d'entretien:

Si vous utilisez un lubrifiant, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Tous les lubrifiants à base d'huile minérale peuvent réduire la durée de vie et l'élasticité d'Anneaux d'érection. Anneaux d'érection peut être réutilisé de nombreuses fois. Nettoyez Anneaux d'érection avec de l'eau chaude et un détergent doux. Conservez-le au sec et à température ambiante.

Remplacez Anneaux d'érection si le matériau devient cassant et s'il perd son élasticité.

Abb. / Fig. 1

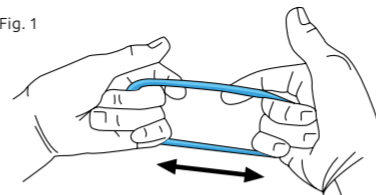


Abb. / Fig. 2


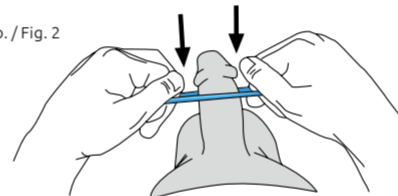


Abb. / Fig. 3



Gebrauchsanweisung beachten / Read instructions for use / Lire le mode d'emploi

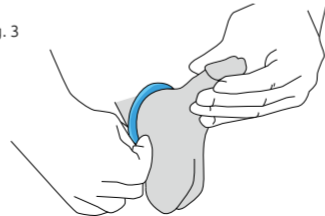

Vor Nässe schützen / Keep dry / Protéger de l'humidité



Abfall / Waste / Déchets



40°C
0°C
Empfohlene Lagertemperatur / Recommended storage temperature / Température de stockage recommandée



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
T: + 49 6105 20 37 20

www.medintim.com

Made in Germany



IA AP ER

EAN: 4013273 001533

Distribué en France par Bivea :
T: 05 57 26 09 00
www.bivea-medical.fr

APER/DE,EN,FR / 26.03.2021

AP Erectionrings

Zur Verstärkung und Verlängerung einer natürlich gebildeten Erektion
For augmentation and prolongation of a natural erection
Renforcent l'érection naturelle et allongent sa durée

3 sizes

Medintim

Deutsch

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation, bevor Sie den AP Erektionsring erstmals verwenden. Dieses Produkt kann bei falscher Anwendung Verletzungen hervorrufen.

Produktinformation

Der AP Erektionsring ist ein Hilfsmittel und wird von Männern mit leichter Impotenz (erektiler Dysfunktion) benutzt. Er ist zur Verbesserung der Erektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder Männern, deren Erektion für eine sexuelle Aktivität nicht anhaltend fest genug ist.

Was ist erektiler Dysfunktion (Impotenz)?

Impotenz ist der umgangssprachliche Begriff für die medizinische Bezeichnung „erektiler Dysfunktion“. Diese ist gegeben, wenn ein Mann keine ausreichende Versteifung entwickeln kann, um sexuelle Aktivitäten auszuführen.

Erektionen sind das Ergebnis einer verstärkten Blutzufuhr zum Penis. Dieses Blut wird dann vorübergehend durch ein Verschießen der Venen gestaut, der Blutrückfluss zum Körper verringert. Es gibt unterschiedliche Formen (Stufen) erektiler Dysfunktion. Einige Männer können die Erektion nicht halten, da sich ihre Venen nicht ausreichend verschließen und das zur Erektion notwendige Blut bleibt nicht im Penis. Der AP Erektionsring hält das Blut länger im Penis und lässt es nach und nach langsam wieder zum Körper fließen.

Einige Erkrankungen, wie z. B. Diabetes Mellitus, Herz-, Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, bestimmte Verletzungen von Nervensträngen, Alkoholismus, Drogen, Rauchen und die Einnahme von Medikamenten können ebenfalls erektiler Dysfunktion verursachen. In diesem Fall kann der AP Erektionsring nur eingeschränkt eine Verbesserung erreichen.

Produkteigenschaften

Der AP Erektionsring wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung) und Fülle des Penis entwickelt. Der AP Erektionsring ist aus Silikonkautschuk hergestellt und in drei Größen erhältlich. Er lässt sich leicht dehnen.

Anwendungshinweise:

1. Der AP Erektionsring wird vor der Versteifung/Erregung übergestreift. Um die bestmögliche Erektion halten zu können, ist die Wahl des richtigen AP Erektionsringes wichtig. Beginnen Sie mit dem größten der drei Ringe.
2. Führen Sie zunächst die Hoden, dann den schlaffen Penis durch den Ring und schieben ihn dann Richtung Körper. Der Ring sitzt nun auf dem Penis, zwischen den Hoden und dem Körper.
3. Sobald die Erregung die Versteifung auslöst, reduziert der AP Erektionsring den Blutrückfluss zum Körper. Dadurch tritt die Versteifung rascher ein, ist kräftiger und auch länger anhaltend.

4. Der AP Erektionsring verbessert und verstärkt die natürlich gebildete Erektion. Die Lage des Ringes vor dem Schambein ermöglicht es der Partnerin, sich klitoral daran zu stimulieren.

5. Lösen der Spannung: Nach dem Geschlechtsverkehr oder falls die Erektion zu fest ist, kann der AP Erektionsring leicht gelöst werden: Dehnen Sie ihn mit zwei Händen und warten Sie, bis die Erektion nachlässt. Dann können Sie zunächst den Penis und dann die Hoden herausziehen. Der AP Erektionsring kann mehrmals benutzt werden.

Wichtiger Hinweis

Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt/Ärztin vor der Anwendung des AP Erektionsringes, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

- Falls Sie einen anormal geformten Penis haben
- Falls Sie medizinische Gründe haben, keine sexuelle Aktivität auszuführen
- Falls Sie an Sichelzellenanämie, Leukämie, Knochenmarktumoren oder anderen

Erkrankungen, die eine veränderte Blutgerinnung zur Folge haben, leiden und die zu Blutungen und verlängerten Erektionen führen.

Benutzen Sie den AP Erektionsring niemals länger als 30 Minuten.

Eine zu lange Anwendung des AP Erektionsringes kann eine dauerhafte Verletzung des Penis verursachen. Schlafen Sie nicht mit dem Ring auf dem Penis ein.

Bei Problemen fragen Sie Ihren Arzt/Ärztin und wenden Sie den AP Erektionsring nicht mehr an. Nehmen Sie keinen Alkohol oder Beruhigungsmittel während der Anwendung des AP Erektionsringes ein. Benutzen Sie den AP Erektionsring nicht, wenn Sie keine Schmerzempfindung im Penis haben.

Nutzen Sie den AP Erektionsring nicht, falls Ihre Hände eine eingeschränkte Mobilität haben.

Mögliche Nebenwirkungen:

- Andauernde Erektion: falls die Versteifung mehr als 2 Stunden anhält, rufen Sie sofort Ihren Arzt an.
- Dauerhafte Verletzung des Penisbodens falls der AP Erektionsring entweder zu fest war oder länger als 30 Minuten angewandt wurde.

Pflegehinweise:

Falls Sie Gleitmittel benutzen, empfehlen wir hierzu wasserlösliche Gleitmittel. Alle mineralöhlhaltigen Gleitmittel könnten die Lebensdauer und Dehnbarkeit des AP Erektionsringes beeinträchtigen. Der AP Erektionsring kann mehrmals benutzt werden. Reinigen Sie ihn mit warmem Wasser und milder Seife und bewahren Sie ihn trocken und bei Zimmertemperatur auf. Ersetzen Sie den AP Erektionsring falls das Material brüchig wird oder nicht mehr die Spannung hat, um die Dehnung zu erlangen.

English

Instructions

Please read this information carefully before using the AP Erectionring. This device may cause injury if not used correctly.

Indications:

The AP Erectionring is a device used by men with light erectile dysfunction or impotence. The erection ring is intended to improve the quality of the erection of the penis.

What is Erectile Dysfunction (Impotence)?

Erectile dysfunction is commonly called impotence. Impotence is the inability of a man to get or to keep an erection firm enough to perform sexually. Normal erections are the result of increasing blood flow into the penis. This blood is then stored by temporarily closing off the veins that drain the penis. There are different levels of erectile dysfunction recognized. Some men cannot keep an erection because the veins of the penis stay open

and prevent enough blood from being stored in the penis. Many of these men can be helped with the use of the AP Erectionring. The AP Erectionring keeps the blood longer in the penis and the blood flow back to the body is reduced.

Diseases like diabetes mellitus, vascular disease, high blood pressure, certain nerve injuries, alcoholism, drugs and smoking may cause impotence. Impotence also may be a side effect of common medications. In those conditions, the AP Erectionring might not always be helpful.

Product Requirements

The AP Erectionrings are designed to support stiffness and shape of the penis.

The AP Erectionring is made from silicone rubber and available in three sizes and easy to extend.

Application

The AP Erectionring is a device designed to improve erections by increasing the fullness and firmness of the penis. The AP Erectionring is made of silicone

rubber that is placed around the base of the penis behind the scrotum (testicles). This pressure reduces the flow of blood out of the penis. Instructions for use are below:

How to use the AP Erectionring:

1. Stretch the AP Erectionring before you have any arousal (stiffening). To choose the right rings size helps to achieve the best performance. Note to start with the biggest ring size.
2. At first: place the scrotum (testicles) through the ring, followed by the flat, non erected penis. The ring should be placed on the penis between the scrotum and the body.
3. When your arousal causes the erection (stiffening), the AP Erectionring reduces the blood flow back to the body. The erection will appear quicker, will be better and will remain longer.

4. The AP Erectionring makes a better performance and supports the naturally achieved erection. The positioning of the ring front of the pubic bone may stimulate the female partner at her clitoris.

5. To loosen the tension: after intercourse or if the erection is too firm, the AP Erectionring may be loosened by pulling by hands on two ends of the ring. The firmness will reduce. Now the Erection ring can be removed by sliding out the penis, followed by the scrotum.

Important to know

Talk to your healthcare provider if any of the following factors apply:

- If you have medical advices not to have sexual activities
- If you have sickle cell anemia or trait, leukemia, tumor of the bone marrow or other conditions that change blood clotting and may result in bleeding or prolonged erections.
- If you have an abnormally formed penis

Warning and precautions

This product is made of silicone rubber and free of latex.

Do not use the AP Erectionring for more than 30 minutes per use.

Use of the AP Erectionring for too long may cause permanent injury to the penis.

Do not fall asleep wearing the AP Erectionring.

Call your doctor if a problem occurs. Stop using the AP Erectionring if these problems persist. Do not use alcohol or sedative when using the AP Erectionring. Do not use the AP Erectionring if you cannot sense pain in the penis.

Do not use the AP Erectionring if you do not have adequate use of your hands to easily remove the device.

Possible side effects

- Prolonged erection: if your erection is firm for more than 2 hours, call your healthcare provider immediately
- Permanent injury to the penis if the AP Erectionring is either worn too tight or for more than 30 minutes.

Care of the AP Erectionring:

if you use a lubricant for sexual activity, use only water-based lubricants. Mineral-oil based lubricants may decrease the life time and flexibility of the AP Erectionring.

The AP Erectionring is reusable. Clean it after use with warm water and mild soap. Keep and store at a dry place.

Replacement:

repeated use of the AP Erectionring device may result in wearing out. In this case, replace the AP Erectionring.