

BON DE COMMANDE

Monsieur Madame

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone mobile*

Téléphone fixe*

E-mail

*Important pour la livraison
Conformément à la loi Informatique et Liberté N°7817 du 06/01/1978,
je dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant.

Le vacuum a-t-il été recommandé par un professionnel de santé ?

Oui Non

Si oui, nom - CP/ Ville du prescripteur :

Possibilités de paiement

Par internet avec paiement sécurisé en 1 ou 3 fois sans frais
www.bivea-medical.fr

Par chèque à l'ordre de Bivea

- Paiement en 1 fois
- Paiement en 3 fois sans frais :
3 chèques encaissés à 1 mois d'intervalle
97€, 96€ et 96€ pour vacuums MES ou AES 3

À retourner à l'adresse : Bivea Médical
6 rue du Solarium, 33170 Gradignan

Par téléphone

au 05 57 26 09 00 avec règlement par CB ou CB en 3 fois
Depuis l'étranger 00 33 5 57 26 09 00

Dispositifs médicaux CE de classes I et IIa

Fabriqués par Medintim,
entreprise allemande certifiée ISO 13485.



Lire attentivement les instructions figurant
sur la notice fournie avec le produit. En cas de doute,
demandez conseil à votre médecin.


Caractéristiques techniques

Avec manchon 1 et cylindre
Ø 39 mm et longueur 230 mm

Avec manchon 2 et cylindre
Ø 45mm et longueur 208 mm

Cylindre seul
Ø 53 mm et longueur 190 mm

Dépressurisation max
366 mmHg

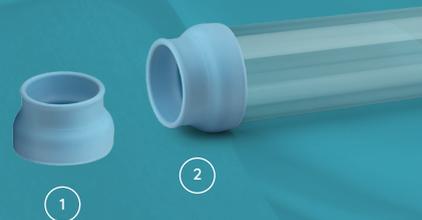

GARANTIE ET SERVICE

Garantie pendant 2 ans :

Pièces hors consommables (anneaux et lubrifiant).
Pour une utilisation conforme de l'appareil.

Satisfait ou remboursé pendant 30 jours.

L'équipe **Bivea** est formée
pour répondre à vos questions
et vous aide dans l'apprentissage
de l'appareil.



6 rue du Solarium
33170 Gradignan

Bivea
MEDICAL

05 57 26 09 00
info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr

DYSFONCTION ÉRECTILE



**Vacuums
Medintim**

Dispositifs médicaux pour traiter
les troubles de l'érection

Bivea
MEDICAL

Crédits photos : Bivea et Fotolia – Ne pas jeter sur la voie publique - 082023



Le Vacuum ou "pompe à érection" Medintim


Pour des patients souffrant de dysfonction érectile souhaitant reprendre une activité sexuelle de qualité.

Permet d'obtenir une érection simplement et sereinement sans médicament.

Peut être utilisé pour faire de la rééducation pénienne et pour la reprise des rapports sexuels.


Fonctionnement du pénis

Le pénis est un organe qui contient un système vasculaire complexe : les corps caverneux et le corps spongieux. L'érection est obtenue grâce au remplissage des corps caverneux et spongieux. Ce système vasculaire est gouverné par de nombreux mécanismes hormonaux et par l'activité cérébrale.

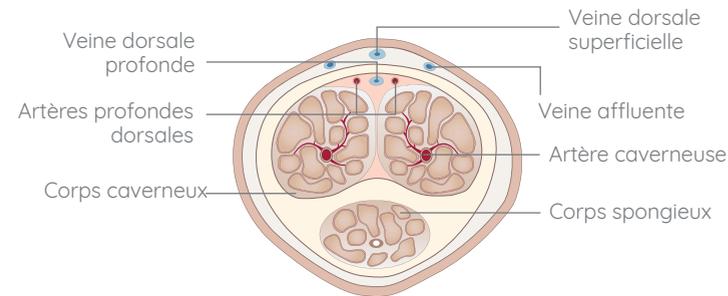


Dispositif mécanique

La pompe génère une dépression, "le vide", autour du pénis, ce qui provoque un afflux de sang dans les corps caverneux et crée l'érection. Un anneau de constriction élastique serre le pénis sans douleur afin d'y maintenir le sang.

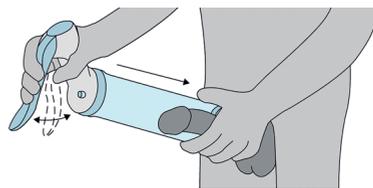

Utilisation simple

1. Mettez l'anneau en place sur l'appareil.
2. Insérez le pénis au repos dans le cylindre.
3. Pressez l'appareil contre votre corps et commencez à pomper jusqu'à l'obtention d'une érection parfaite.
4. Positionner l'anneau à la base du pénis pour conserver l'érection en dehors du vacuum.

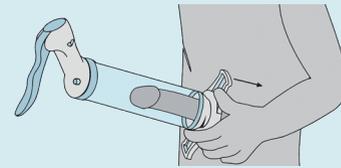

L'érection est obtenue en moins de deux minutes. Elle pourra se prolonger jusqu'à 30 minutes maximum si l'anneau est maintenu en place.

Un bouton sur la tête de la pompe sert à laisser rentrer de l'air si le vide créé est trop important et permet de retirer l'appareil une fois que l'érection est obtenue.

Pourquoi choisir le vacuum Medintim ?

Pour son efficacité

- Fonctionne quelle que soit l'origine des dysfonctions érectiles (prostatectomie, diabète, maladie cardio-vasculaire, traumatisme de la moelle épinière, ...).
- Action mécanique
- Pas besoin de stimulation
- L'érection est obtenue rapidement

Pour sa sécurité

- Utilisation totalement indolore
- Maîtrise de l'érection (durée et intensité)
- Sans risque de priapisme (érection prolongée pouvant devenir douloureuse)
- Solution non médicamenteuse

Vacuum à tête manuelle Manual Erection System®



Garantie SATISFAIT OU REMBOURSÉ 1 mois

- Le vide se fait en 30 à 40 pressions pour maîtriser avec précision la qualité de l'érection.
- Il est conseillé en cas de rééducation (suite à une prostatectomie ou à un long moment sans érection de qualité).
- Il fonctionne sans batterie ce qui le rend utilisable en toutes circonstances.

Vacuum à tête électrique Active Erection System 3®



Garantie SATISFAIT OU REMBOURSÉ 1 mois

- Une lumière illumine le cylindre pour une meilleure visibilité du pénis dans le noir.
- La nouvelle tête d'aspiration est très silencieuse.
- La batterie au lithium est rechargeable facilement.

BON DE COMMANDE

Bivea Médical
6 rue du Solarium, 33170 Gradignan
Tél : 05 57 26 09 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
Commande sur www.bivea-medical.fr,
par courrier ou par téléphone

Je commande le vacuum Medintim modèle manuel Manual Erection System (MES) à 289 €.

- Kit comprenant une trousse,
- La tête manuelle,
- 5 anneaux de taille 1 à 5,
- 2 manchons,
- 1 cylindre,
- 1 tube de lubrifiant Animé 50ml,
- 1 notice.



Je commande le vacuum Medintim modèle électrique Active Erection System (AES 3) à 289 €.

- Kit comprenant une trousse,
- la tête électrique + chargeur,
- 5 anneaux de taille 1 à 5,
- 2 manchons,
- 1 cylindre,
- 1 tube de lubrifiant Animé 50ml,
- 1 notice.

